

Укладка УПМ-Н (новая) – это существенно модифицированная укладка УМСП-Пм/2, которой за последние 20 лет было оснащено и переоснащено более 70 тысяч автомобилей СМП во всех регионах РФ.

Габариты УПМ-Н: 514x260x324
Вес без вложений 3,6 кг.



ампульницы



ложементы



ОПИСАНИЕ

При создании новой укладки учтены все пожелания врачей, возникшие за десятилетия эксплуатации:

- Внешние габариты укладки немного увеличились, однако внутренний полезный объем стал гораздо больше, а также улучшился обзор содержимого за счет увеличения градуса раскрытия створок. Теперь укладка вмещает более двухсот ампул только в лотках, а доступ к ним и медицинскому оборудованию стал проще.

- Плоская верхняя часть упаковок позволяет ставить их друг на друга для удобного хранения. Кроме того, теперь укладку можно использовать как подставку или сиденье для пациента или врача.

- Существенно увеличена прочность и удобство использования укладки за счёт конструктивных доработок и более качественного термоустойчивого антивандального пластика. Благодаря этому укладка выдерживает нагрузку до 200 кг и температуру до 50°C.

- Добавлены новые пластиковые ампульницы на 1-2 мл и 5-10 мл, предназначенные для размещения в лотках, а так же на дне укладки или в специально созданных ячейках внутри створок. При этом можно сочетать использование традиционных ложементов с вертикально ориентированными ампульницами. Это решение позволило увеличить (в случае необходимости) количество удобно размещённых и хорошо защищённых ампул до 250-270 штук и предоставило возможность медицинскому персоналу самостоятельно выбирать оптимальную комбинацию традиционных ложементов и новых пластиковых ампульниц.

- Новая конструкция укладки позволяет разместить манипуляционный столик в ранее пустующих зонах внутри створок укладки, освободив при этом часть дна укладки для дополнительных вложений.

- Появились специальные места для фиксации плечевого ремня.

- Внутри укладки предусмотрено место для размещения светодиодного фонарика, а также подсушков из ПВХ снаружи укладки для хранения отходов и средств индивидуальной защиты.

- Добавлены съёмные перегородки в дно и лоток.

- Ложемент изготовлен из нового влагостойкого материала ЭВА. Конструкция ложемента выполнена с учетом всех пожеланий врачей СМП по размещению ампул различного объема.

* При заказе более 100 упаковок мы можем модифицировать их согласно вашим пожеланиям

 **медплант**

г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»
e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru
т.: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный), +7 (495) 223-66-38



РЕЗИДЕНТ 
ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»

 **медплант**

УКЛАДКА ВРАЧА СМП

НОВИНКА!



СЕРИЯ УПМ-Н

Медицинские изделия для экстренной помощи

УКЛАДКА ПЛАСТИКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕРИИ УПМ

Укладка представляет собой саквояж из высокопрочного термостойкого оранжевого пластика, имеющий удобную литую ручку и надежные замки.

Дно футляра прочное, износостойкое. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в которые установлены лотки, сохраняющие постоянную вертикальную ориентацию, что исключает переворачивание содержимого при раскрытии укладки.



ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ
32 л



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ от -40 °С до +50 °С



ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ
более 200 кг



ВЕС УКЛАДКИ (без вложений и ложементов) 3,6 кг



ГАБАРИТЫ УКЛАДКИ:
514x260x324

НАЗНАЧЕНИЕ

Укладки пластиковые медицинские предназначены для хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских инструментов, перевязочных материалов и других изделий, используемых при оказании экстренной помощи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы первой и скорой медицинской помощи, медицина катастроф, учреждения здравоохранения, здравпункты предприятий.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРИК С КРЕПЛЕНИЕМ опционально




удобное место для хранения



возможность установки как внутри так и снаружи укладки



крепления, предотвращающие выпадение ампул

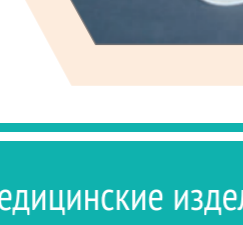

РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ




усиленные рычаги створок

легкосъемные перегородки в дно и лоток

УДОБНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ

гарантия 5 лет

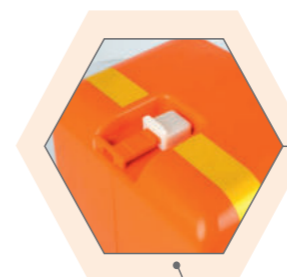

штатное место хранения ампул

ложементы

лоток


ШТАТНОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИОННОГО СТОЛИКА

расположено внутри створок укладки



МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ СТОЛИК

может быть закреплен на любой вертикальной плоскости укладки

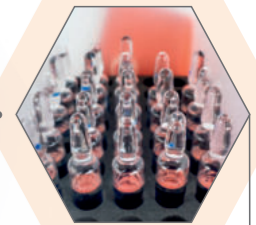


ЛОЖЕМЕНТЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АМПУЛ

из влагостойкого материала, оснащены местами для скарификаторов, ампул, флаконов

ВНЕШНИЙ ПОДСУМОК



может быть использован как контейнер для отходов, а так же для хранения средств индивидуальной защиты

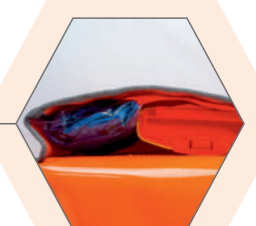

СКОБА

для транспортировки мешка с отходами класса Б



СКРЫТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
не портящие одежду



АМПУЛЬНИЦЫ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
объемом 1-2 мл и 5-10 мл

ложементы

замок

дно

рычаг

створка